

Használati utasítás

Fairywill 507/508/551/917/959 típusú fogkefék fejének
cseréjéhez

Köszönjük, hogy a Fairywill fogkefét választotta.

Az elem cseréje előtt figyelmesen olvassa el a használatiútmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Figyelmeztetések

Ne tisztítsa a fogkefefejet, a fogkefe markolatot vagy a töltőegységet mosogatógépben. Ha az elmúlt 2 hónapban szájsebészetiműtétje volt, előbb kérje ki fogorvosa tanácsát, mielőtt a készüléket használná.

Forduljon fogorvosához, ha a fogkefehasználata során túlzott vérzés jelentkezik


Ne használja tovább a fogkefefejet, ha a sörték töröttek vagy hajlottak. Háromhavonta cserélje a fogkefefejet, amennyiben a kopás jelei mutatkoznak, hamarabb cserélje. Csak a gyártó által ajánlott fogkefefejjel használja a készüléket.

Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.

Jellemzők

Egyedi kialakítású sörték, amelyek pontosan követik az egyes fogak felületét az íny és a nehezen elérhető területek alapos tisztításához

Csere

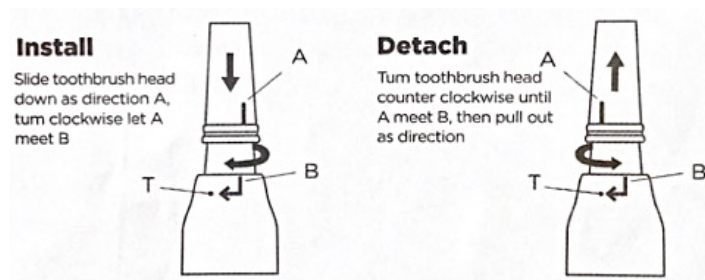

Csúsztassa le a fogkefefejet a fogantyúra, forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, amíg A találkozik T-vel.

Forgassa el a fogkefefejet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg az A találkozik B-vel, majd húzza ki a fogantyú mentén.

Háromhavonta cserélje a fogkefefejeket a megfelelő eredmény elérése érdekében.

Sörte anyaga: műanyag



Kedves Vásárlónk!
Kérjük értékelje termékünket!
e-hall.hu
Piacvezető termékek kedvező áron!